



تنفس کنید

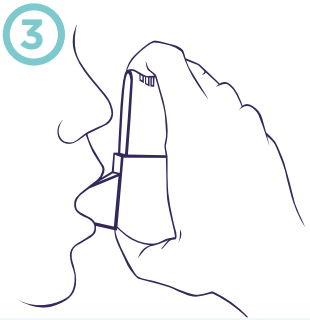


- بصورت عادی تنفس نمایید (اما نه به داخل Easyhaler®)
- لبهای خود را محکم به دور Easyhaler® بچسبانید
- بطور پیوسته و عمیق از طریق Easyhaler® نفس بکشید
- Easyhaler® را از دهان خود برداشته و نفس خود را برای ۵ ثانیه نگهدارید
- بعد از آن نزدیک دستگاه عمل تنفس را انجام دهید
- سرپوش نگهدارنده قطعه دهانی را دوباره بگذارید

کلیک کنید

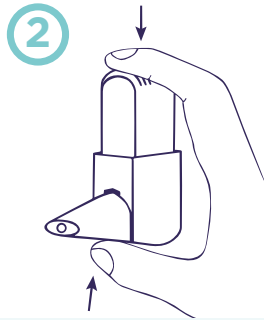


- قطعه تنفسی را بصورت عمودی نگهدارید
- انگشت شصت خود را در قسمت پایینی، و انگشت اشاره را در قسمت بالایی آله متذکره قرار داده و محکم فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.
- بعد از آن بگذارید که با صدای کلیک آله متذکره به حالت اولیه خود برگردد.

تکان بدهید

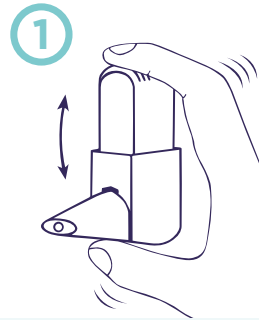

- Easyhaler® را ۳ تا ۵ مرتبه خوب تکان بدهید

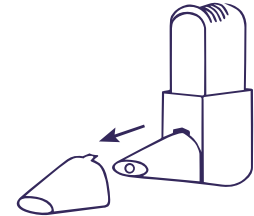


- سرپوش نگهدارنده را از قطعه دهانی جدا سازید

اگ بیشتر از یک دوز برایتان تجویز شده است، مراحل ۲ الی ۴ را تکرار نمایید.

! جهت کاهش خطر عفونتهای قارچی، دهان خود را شسته و غرغره نموده ولی قورت ندهید.

شمارنده


Easyhaler® دارای یک شمارنده است که تعداد دوز باقیمانده در قطعه دهانی را نشان میدهد.

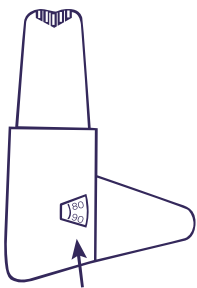

- شمارنده بعد از هر ۵ بار استفاده حرکت میکنند
- زمانیکه شماره ها سرخ شدند: تنها تعداد ۲۰ دوز باقیمانده است
- زمانیکه شمارنده ۰ شود، Easyhaler® را باید تبدیل نمایید

در صورت استفاده از پوش محافظ

Easyhaler® نباید برای استنشاق از پوش محافظ خارج شود.

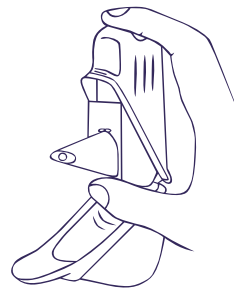

- سرپوش محافظ را باز کنید
- سرپوش محافظ را از بالای دهن بردارید.
- همان قسم که در مراحل 1 تا 3 شرح داده شده است، عمل استنشاق را انجام دهید.
- سرپوش محافظ را بالای دهن دستگاه قرار دهید.
- پوش محافظ را بسته کنید.

عیب یابی


فناوری Easyhaler® از استعمال مقدار دو برابر اندازه ضرورت جلوگیری می کند!

اگر ...

- تصادفاً Easyhaler® را پر نمودید
- Easyhaler® را بیشتر از یکبار فشار دادید
- به داخل قطعه تنفسی پف نمودید

پس ...

- به آهستگی بر روی یک میز یا دست خود با قطعه دهانی Easyhaler® ضربه بزنید

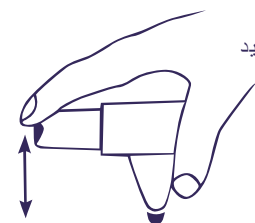

معلومات بیشتر را در این وبسایت مشاهده می کنید: www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland