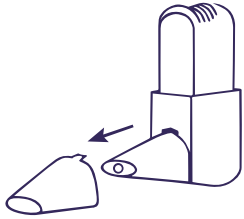


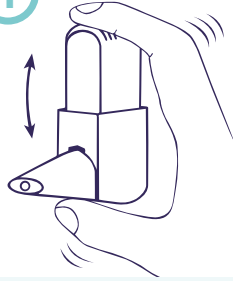
Εύκολη χρήση:

Η εισπνοή με το Easyhaler® βήμα-βήμα.

Ανακινήστε

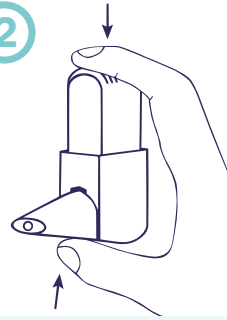


- Αφαιρέστε το καπάκι από το επιστόμιο

1

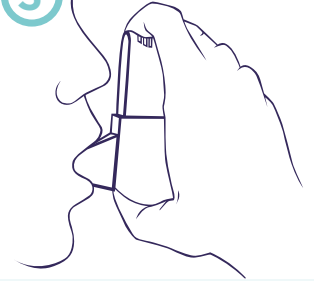
- Ανακινήστε καλά το Easyhaler® 3 έως 5 φορές

Ακούστε το κλικ

2

- Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση
- Πιέστε μία φορά με τον αντίχειρα και τον δακτύλιο, εωςότου ακουστεί ένα κλικ
- Στη συνέχεια αφήστε να επανέλθει στην αρχική θέση

Εισπνεύστε

3

- Εκπνεύστε κανονικά (ΟΧΙ όμως στο Easyhaler®)
- Κρατήστε το Easyhaler® σφικτά με τα χείλη σας
- Εισπνεύστε δυνατά και βαθιά από το Easyhaler®
- Απομακρύνετε τη συσκευή και κρατήστε την αναπνοή σας για 5 δευτερόλεπτα
- Στη συνέχεια, εκπνεύστε κοντά στη συσκευή.
- Τοποθετήστε το καπάκι στο επιστόμιο

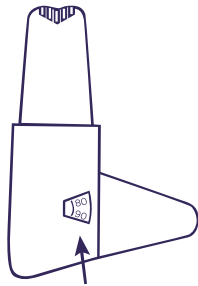
Εάν έχετε οδηγίες για περισσότερες από μία δόσεις ανά εφαρμογή, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο μυκητιάσεων ξεπλύνετε το στόμα και το φάρυγγα με νερό
- ΧΩΡΙΣ να το καταπιείτε.

Ο μετρητής

Το Easyhaler® διαθέτει μετρητή, ο οποίος δείχνει πόσες δόσεις απομένουν.

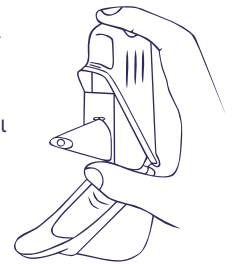
- Μετά από κάθε 5η χρήση ο μετρητής προχωράει
- Η κόκκινη σήμανση σημαίνει ότι: απομένουν ακόμη μόνο 20 δόσεις
- Όταν ο μετρητής δείξει 0, το Easyhaler® πρέπει να αντικατασταθεί



Όταν χρησιμοποιείτε το προστατευτικό κουτί

Το Easyhaler® ΔΕΝ πρέπει να αφαιρεθεί από το προστατευτικό κουτί για την εισπνοή.

- Ανοίξτε το προστατευτικό κουτί
- Αφαιρέστε το καπάκι από το επιστόμιο
- Εισπνεύστε, όπως περιγράφεται στα βήματα 1 έως 3
- Τοποθετήστε το καπάκι στο επιστόμιο
- Κλείστε το προστατευτικό κουτί

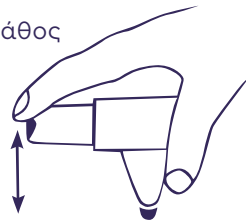


Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης

Η τεχνολογία του Easyhaler® αποτρέπει τη διπλή δόση!

Εάν...

- γεμίσατε το Easyhaler® κατά λάθος
- πιέσατε το Easyhaler® περισσότερο από μία φορά
- εκπνεύσατε στη συσκευή

**Τότε...**

- τινάζετε το Easyhaler® με το επιστόμιο επάνω στην επιφάνεια ενός τραπεζιού ή στο χέρι σας

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο: www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de



Manufactured in Finland