



Jednostavna primjena:

Inhalacija inhalatorom Easyhaler® korak po korak.


Protresite

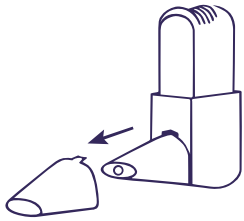

- poklopac skinite s usnika
- Easyhaler® snažno protresite 3 do 5 puta

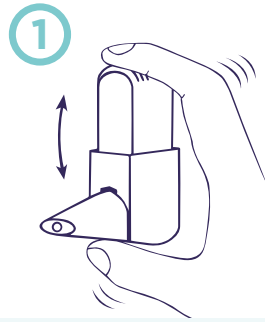


Škljocnite

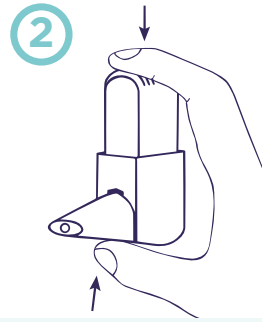

- uređaj držite okomito
- jedanput snažno stisnite palcem i kažiprstom sve dok ne začujete škljocaj
- zatim pustite da se vrati u početni položaj

Inhalirajte

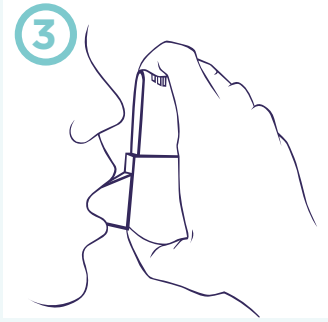

- normalno izdahnite (ali NE u Easyhaler®)
- Easyhaler® čvrsto obuhvatite usnama
- snažno i duboko udahnite kroz Easyhaler®
- uklonite uređaj i zadržite dah na 5 sekundi
- Nakon toga izdahnite pored inhalatora
- poklopac stavite na usnik


Ako je propisano više od jedne doze po primjeni, ponovite korake 1 do 3.

▼ Kako biste smanjili rizik od gljivične infekcije, usta i ždrijelo isperite vodom, ■ a da je NE progutate.

Stanje brojača

Easyhaler® ima brojač koji prikazuje koliko je još pojedinačnih doza ostalo.


- brojač se pomakne nakon svake 5. primjene
- crvena oznaka signalizira: ostalo je još samo 20 pojedinačnih doza
- kada je brojač na 0, valja zamijeniti Easyhaler®

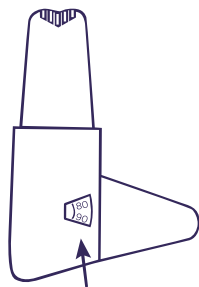

Ako koristite zaštitnu kutiju

Easyhaler® za inhalaciju NIJE potrebno vaditi iz zaštitne kutije.

- Otvoriti zaštitnu kutiju
- Zaštitnu kapu skinuti s usnika
- Inhalirati kao što je opisano u koracima 1 do 3
- Zaštitnu kapu nataknuti na usnik
- Zatvoriti zaštitnu kutiju

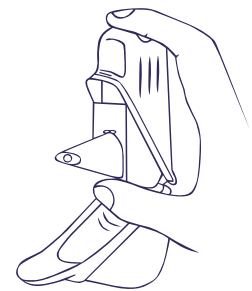

U slučaju neuspjele primjene


Tehnika proizvoda Easyhaler® sprječava dvostruko doziranje!

U slučaju...

- da je Easyhaler® nehotice napunjen
- da je Easyhaler® aktiviran više od jedanput
- da ste izdahnuli u uređaj

Tada...

- Easyhaler® istresite usnikom na stol ili u svoju ruku

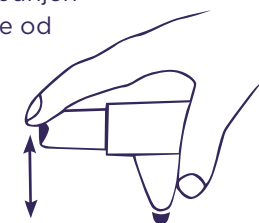

Više informacija doznajte na:
www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland

ORION
PHARMA

EASYHALER